



GE Healthcare

gehealthcare.com

Technical Publications

Direction 2173221-100

Revision 8

AMX-4+ Ratings and Specifications (Model 2169360, 2236420 & 2275938 Series)

Copyright© 1996, 1997, 1999, 2000, 2003 and 2004 By General Electric Co.
All Rights Reserved



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(BG)

- ТОВА УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА Е НАЛИЧНО САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
- АКО ДОСТАВЧИКЪТ НА УСЛУГАТА НА КЛИЕНТА ИЗИСКА ЕЗИК, РАЗЛИЧЕН ОТ АНГЛИЙСКИ, ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА КЛИЕНТА Е ДА ОСИГУРИ ПРЕВОД.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБОРУДВАНЕТО ПРЕДИ ДА СТЕ СЕ КОНСУЛТИРАЛИ И РАЗБРАЛИ УПЪТВАНЕТО ЗА РАБОТА.
- НЕСПАЗВАНЕТО НА ТОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА, ОПЕРАТОРА ИЛИ ПАЦИЕНТ В РЕЗУЛТАТ НА ТОКОВ УДАР ИЛИ МЕХАНИЧНА ИЛИ ДРУГА ОПАСНОСТ.

警告

(ZH-CN)

- 本维修手册仅提供英文版本。
- 如果维修服务提供商需要非英文版本，客户需自行提供翻译服务。
- 未详细阅读和完全理解本维修手册之前，不得进行维修。
- 忽略本警告可能对维修人员，操作员或患者造成触电、机械伤害或其他形式的伤害。

VÝSTRAHA

(CS)

- TENTO PROVOZNÍ NÁVOD EXISTUJE POUZE V ANGLICKÉM JAZYCE.
- V PŘÍPADĚ, ŽE EXTERNÍ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM POTŘEBUJE NÁVOD V JINÉM JAZYCE, JE ZAJIŠTĚNÍ PŘEKladU DO ODPOVÍDAJÍCÍHO JAZYKA ÚKOLEM ZÁKAZNÍKA.
- NESNAŽTE SE O ÚDRŽBU TOHOTO ZAŘÍZENÍ, ANIŽ BYSTE SI PŘEČETLI TENTO PROVOZNÍ NÁVOD A POCHOPILI JEHO OBSAH.
- V PŘÍPADĚ NEDODRŽOVÁNÍ TÉTO VÝSTRAHY MŮŽE DOJÍT K PORANĚNÍ PRACOVNÍKA PRODEJNÍHO SERVISU, OBSLUŽNÉHO PERSONÁLU NEBO PACIENTŮ Vlivem ELEKTRICKÉHO PROUDU, RESPEKTIVE Vlivem MECHANICKÝCH ČI JINÝCH RIZIK.

ADVARSEL

(DA)

- DENNE SERVICE MANUAL FINDES KUN PÅ ENGELSK.
- HVIS EN KUNDES TEKNIKER HAR BRUG FOR ET ANDET SPROG END ENGELSK, ER DET KUNDENS ANSVAR AT SØRGE FOR OVERSÆTTELSE.
- FØRSØG IKKE AT SERVICERE Udstyret MEDMINDRE DENNE SERVICE MANUAL HAR VÆRET KONSULTERET OG ER FORSTÅET.
- MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE ADVARSEL KAN MEDFØRE SKADE PÅ GRUND AF ELEKTRISK, MEKANISK ELLER ANDEN FARE FOR TEKNIKEREN, OPERATØREN ELLER PATIENTEN.

WAARSCHUWING

(NL)

- DEZE ONDERHOUDSHANDLEIDING IS ENKEL IN HET ENGELS VERKRIJGBAAR.
- ALS HET ONDERHOUDSPERSONEEL EEN ANDERE TAAL VEREIST, DAN IS DE KLANT VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERTALING ERVAN.
- PROBEER DE APPARATUUR NIET TE ONDERHOUDEN VOORDAT DEZE ONDERHOUDSHANDLEIDING WERD GERAADPLEEGD EN BEGREPEN IS.
- INDIEN DEZE WAARSCHUWING NIET WORDT OPGEVOLGD, ZOU HET ONDERHOUDSPERSONEEL, DE OPERATOR OF EEN PATIËNT GEWOND KUNNEN RAKEN ALS GEVOLG VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK, MECHANISCHE OF ANDERE GEVAREN.
- THIS SERVICE MANUAL IS AVAILABLE IN ENGLISH ONLY.

WARNING

(EN)

- IF A CUSTOMER'S SERVICE PROVIDER REQUIRES A LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH, IT IS THE CUSTOMER'S RESPONSIBILITY TO PROVIDE TRANSLATION SERVICES.
- DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE EQUIPMENT UNLESS THIS SERVICE MANUAL HAS BEEN CONSULTED AND IS UNDERSTOOD.
- FAILURE TO HEED THIS WARNING MAY RESULT IN INJURY TO THE SERVICE PROVIDER, OPERATOR, OR PATIENT FROM ELECTRIC SHOCK, OR FROM MECHANICAL OR OTHER HAZARDS.

HOIATUS

(ET)

- KÄESOLEV TEENINDUSJUHEND ON SAADAVAL AINULT INGLISE KEELES.
- KUI KLIENDITEENINDUSE OSUTAJA NÕUAB JUHENDIT INGLISE KEELEST ERINEVAS KEELES, VASTUTAB KLIENT TÖLKETEENUSE OSUTAMISE EEST.
- ÄRGE ÜRITAGE SEADMEID TEENINDADA ENNE EELNEVALT KÄESOLEVA TEENINDUSJUHENDIGA TUTVUMIST JA SELLEST ARU SAAMIST.
- KÄESOLEVA HOIATUSE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA TEENUSEOSUTAJA, OPERAATORI VÕI PATSIENDI VIGASTAMIST ELEKTRILÖÖGI, MEHAANILISE VÕI MUU OHU TAGAJÄRJEL.

VAROITUS

(FI)

- TÄMÄ HUOLTO-OHJE ON SAATAVILLA VAIN ENGLANNIKSI.
- JOS ASIAKKAAN HUOLTOHENKILÖSTÖ VAATII MUUTA KUIN ENGLANNINKIELISTÄ MATERIAALIA, TARVITTAVAN KÄÄNNÖKSEN HANKKIMINEN ON ASIAKKAAN VASTUULLA.
- ÄLÄ YRITÄ KORJATA LAITTEISTOA ENNEN KUIN OLET VARMASTI LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT TÄMÄN HUOLTO-OHJEEN.
- MIKÄLI TÄTÄ VAROITUSTA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA VOI OLLA HUOLTOHENKILÖSTÖN, LAITTEISTON KÄYTTÄJÄN TAI POTILAAN VAHINGOITTUMINEN SÄHKÖISKUN, MEKAANISEN VIAN TAI MUUN VAARATILANTEEN VUOKSI.

ATTENTION

(FR)

- CE MANUEL DE SERVICE N'EST DISPONIBLE QU'EN ANGLAIS.
- SI LE TECHNICIEN DU CLIENT A BESOIN DE CE MANUEL DANS UNE AUTRE LANGUE QUE L'ANGLAIS, C'EST AU CLIENT QU'IL INCOMBE DE LE FAIRE TRADUIRE.
- NE PAS TENTER D'INTERVENIR SUR LES EQUIPEMENTS TANT QUE LE MANUEL SERVICE N'A PAS ETE CONSULTE ET COMPRIS
- LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ LE TECHNICIEN, L'OPÉRATEUR OU LE PATIENT DES BLESSURES DUES À DES DANGERS ÉLECTRIQUES, MÉCANIQUES OU AUTRES.

WARNUNG

(DE)

- DIESE SERVICEANLEITUNG EXISTIERT NUR IN ENGLISCHER SPRACHE.
- FALLS EIN FREMDER KUNDENDIENST EINE ANDERE SPRACHE BENÖTIGT, IST ES AUFGABE DES KUNDEN FÜR EINE ENTSPRECHENDE ÜBERSETZUNG ZU SORGEN.
- VERSUCHEN SIE NICHT DIESE ANLAGE ZU WARTEN, OHNE DIESE SERVICEANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN ZU HABEN.
- WIRD DIESE WARNUNG NICHT BEACHTET, SO KANN ES ZU VERLETZUNGEN DES KUNDENDIENSTTECHNIKERS, DES BEDIENERS ODER DES PATIENTEN DURCH STROMSCHLÄGE, MECHANISCHE ODER SONSTIGE GEFAHREN KOMMEN.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(EL)

- ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕΡΒΙΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΝΟ.
- ΕΑΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ.
- ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕΡΒΙΣ.
- ΕΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕΡΒΙΣ, ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Ή ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.

FIGYELMEZTETÉS

(HU)

- EZEN KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG ANGOL NYELVEN ÉRHETŐ EL.
- HA A VEVŐ SZOLGÁLTATÓJA ANGOLTÓL ELTÉRŐ NYELVRE TART IGÉNYT, AKKOR A VEVŐ FELELŐSSÉGE A FORDÍTÁS ELKÉSZÍTTETÉSE.
- NE PRÓBÁLJA ELKEZDENI HASZNÁLNI A BERENDEZÉST, AMÍG A KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYVBEN LEÍRTAKAT NEM ÉRTELMEZTÉK.
- EZEN FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A SZOLGÁLTATÓ, MŰKÖDTETŐ VAGY A BETEG ÁRAMÜTÉS, MECHANIKAI VAGY EGYÉB VESZÉLYHELYZET MIATTI SÉRÜLÉSÉT EREDMÉNYEZHETI.

AÐVÖRUN

(IS)

- ÞESSI ÞJÓNUSTUHANDBÓK ER EINGÖNGU FÁANLEG Á ENSKU.
- EF AÐ ÞJÓNUSTUVEITANDI VIÐSKIPTAMANNS ÞARFNAST ANNAS TUNGUMÁLS EN ENSKU, ER ÞAÐ SKYLDA VIÐSKIPTAMANNS AÐ SKAFFA TUNGUMÁLAPJÓNUSTU.
- REYNIÐ EKKI AÐ AFGREIÐA TÆKIÐ NEMA AÐ ÞESSI ÞJÓNUSTUHANDBÓK HEFUR VERIÐ SKOÐUÐ OG SKILIN.
- BROT Á SINNA ÞESSARI AÐVÖRUN GETUR LEITT TIL MEIÐSLA Á ÞJÓNUSTUVEITANDA, STJÓRNANDA EÐA SJÚKLINGS FRÁ RAFLOSTI, VÉLRÆNU EÐA ÖÐRUM ÁHÆTTUM.

AVVERTENZA

(IT)

- IL PRESENTE MANUALE DI MANUTENZIONE E DISPONIBILE SOLTANTO IN INGLESE.
- SE UN ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ESTERNO ALLA GEMS RICHIEDE IL MANUALE IN UNA LINGUA DIVERSA, IL CLIENTE E TENUTO A PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLA TRADUZIONE.
- SI PROCEDA ALLA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIATURA SOLO DOPO AVER CONSULTATO IL PRESENTE MANUALE ED AVERNE COMPRESO IL CONTENUTO
- IL NON RISPETTO DELLA PRESENTE AVVERTENZA POTREBBE FAR COMPIERE OPERAZIONI DA CUI DERIVINO LESIONI ALL'ADDETTO ALLA MANUTENZIONE, ALL'UTILIZZATORE ED AL PAZIENTE PER FOLGORAZIONE ELETTRICA, PER URTI MECCANICI OD ALTRI

警告

(JA)

- このサービスマニュアルには英語版しかありません。
- サービスを担当される業者が英語以外の言語を要求される場合、翻訳作業はその業者の責任で行うものとさせていただきます。
- このサービスマニュアルを熟読し理解せずに、装置のサービスを行わないでください。
- この警告に従わない場合、サービスを担当される方、操作員あるいは患者さんが、感電や機械的又はその他の危険により負傷する可能性があります。

경고

(KO)

- 본 서비스 지침서는 영어로만 이용하실 수 있습니다.
- 고객의 서비스 제공자가 영어 이외의 언어를 요구할 경우, 번역 서비스를 제공하는 것은 고객의 책임입니다.
- 본 서비스 지침서를 참고했고 이해하지 않는 한은 해당 장비를 수리하려고 시도하지 마십시오.
- 이 경고에 유의하지 않으면 전기 쇼크, 기계상의 혹은 다른 위험으로부터 서비스 제공자, 운영자 혹은 환자에게 위해를 가할 수 있습니다.

BRĪDINĀJUMS

(LV)

- ŠĪ APKALPES ROKASGRĀMATA IR PIEEJAMA TIKAI ANGLŪ VALODĀ.
- JA KLIENTA APKALPES SNIEDZĒJAM NEPIECIEŠAMA INFORMĀCIJA CITĀ VALODĀ, NEVIS ANGLŪ, KLIENTA PIENĀKUMS IR NODROŠINĀT TULKOŠANU.
- NEVEICIET APRĪKOJUMA APKALPI BEZ APKALPES ROKASGRĀMATAS IZLASĪŠANAS UN SAPRAŠANAS.
- ŠĪ BRĪDINĀJUMA NEIEVĒROŠANA VAR RADĪT ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, MEHĀNISKU VAI CITU RISKU IZRAISĪTU TRAUMU APKALPES SNIEDZĒJAM, OPERATORAM VAI PACIENTAM.

ĮSPĖJIMAS

(LT)

- ŠIS EKSPLOATAVIMO VADOVAS YRA PRIEINAMAS TIK ANGLŲ KALBA.
- JEI KLIENTO PASLAUGŲ TIEKĒJAS REIKALAUJA VADOVO KITA KALBA – NE ANGLŲ, NUMATYTI VERTIMO PASLAUGAS YRA KLIENTO ATSAKOMYBĒ.
- NEMĒGINKITE ATLIKTI ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, NEBENT ATSIŽVELGĖTE Į ŠĮ EKSPLOATAVIMO VADOVĄ IR ĮĮ SUPRATOTE.
- JEI NEATKREIPSITE DĖMESIO Į ŠĮ PERSPĖJIMĄ, GALIMI SUŽALOJIMAI DĖL ELEKTROS ŠOKO,
- MECHANINIŲ AR KITŲ PAVOJŲ PASLAUGŲ TIEKĖJUI, OPERATORIUI AR PACIENTUI.

ADVARSEL

(NO)

- DENNE SERVICEHÅNDBOKEN FINNES BARE PÅ ENGELSK.
- HVIS KUNDENS SERVICELEVERANDØR TRENGER ET ANNET SPRÅK, ER DET KUNDENS ANSVAR Å SØRGE FOR OVERSETTELSE.
- IKKE FORSØK Å REPARERE UTSTYRET UTEN AT DENNE SERVICEHÅNDBOKEN ER LEST OG FORSTÅTT.
- MANGLENDE HENSYN TIL DENNE ADVARSELEN KAN FØRE TIL AT SERVICELEVERANDØREN, OPERATØREN ELLER PASIENTEN SKADES PÅ GRUNN AV ELEKTRISK STØT, MEKANISKE ELLER ANDRE FARER.

OSTRZEŻENIE

(PL)

- NINIEJSZY PODRĘCZNIK SERWISOWY DOSTĘPNY JEST JEDYNIE W JĘZYKU ANGIELSKIM.
- JEŚLI DOSTAWCA USŁUG KLIENTA WYMAGA JĘZYKA INNEGO NIŻ ANGIELSKI, ZAPEWNIENIE USŁUGI TŁUMACZENIA JEST OBOWIAZKIEM KLIENTA.
- NIE PRÓBOWAĆ SERWISOWAĆ WYPOSAŻENIA BEZ ZAPOZNANIA SIĘ I ZROZUMIENIA NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA SERWISOWEGO.
- NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TEGO OSTRZEŻENIA MOŻE SPOWODOWAĆ URAZY DOSTAWCY USŁUG, OPERATORA LUB PACJENTA W WYNIKU PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, ZAGROŻENIA MECHANICZNEGO BĄDŹ INNEGO.

ATENÇÃO

(PT)

- ESTE MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SÓ SE ENCONTRA DISPONÍVEL EM INGLÊS.
- SE QUALQUER OUTRO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUE NÃO A GEMS, SOLICITAR ESTES MANUAIS NOUTRO IDIOMA, É DA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE FORNECER OS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO.
- NÃO TENHA TENTADO REPARAR O EQUIPAMENTO SEM TER CONSULTADO E COMPREENDIDO ESTE MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- O NÃO CUMPRIMENTO DESTES AVISOS PODE POR EM PERIGO A SEGURANÇA DO TÉCNICO, OPERADOR OU PACIENTE DEVIDO A CHOQUES ELÉTRICOS, MECÂNICOS OU OUTROS.

ATENȚIE

(RO)

- ACEST MANUAL DE SERVICE ESTE DISPONIBIL NUMAI ÎN LIMBA ENGLEZĂ.
- DACĂ UN FURNIZOR DE SERVICII PENTRU CLIEȚI NECESITĂ O ALTĂ LIMBĂ DECÂT CEA ENGLEZĂ, ESTE DE DATORIA CLIENTULUI SĂ FURNIZEZE O TRADUCERE.
- NU ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI ECHIPAMENTUL DECÂT ULTERIOR CONSULTĂRII ȘI ÎNȚELEGERII ACESTUI MANUAL DE SERVICE.
- IGNORAREA ACESTUI AVERTISMENT AR PUTEA DUCE LA RĂNIREA DEPANATORULUI, OPERATORULUI SAU PACIENTULUI ÎN URMA PERICOLELOR DE ELECTROCUTARE, MECANICE SAU DE ALTĂ NATURĂ.

ОСТОРОЖНО!

(RU)

- ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
- ЕСЛИ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ КЛИЕНТА НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВО НЕ НА АНГЛИЙСКОМ, А НА КАКОМ-ТО ДРУГОМ ЯЗЫКЕ, КЛИЕНТУ СЛЕДУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕВОД.
- ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ К ДАННОМУ РУКОВОДСТВУ И ПОЙМИТЕ ИЗЛОЖЕННЫЕ В НЕМ СВЕДЕНИЯ.
- НЕСООБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ОПЕРАТОР ИЛИ ПАЦИЕНТ ПОЛУЧАТ УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, МЕХАНИЧЕСКУЮ ТРАВМУ ИЛИ ДРУГОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ.

UPOZORNENIE

(SK)

- TENTO NÁVOD NA OBSLUHU JE K DISPOZÍCII LEN V ANGLIČTINE.
- AK ZÁKAZNÍKOV POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB VYŽADUJE INÝ JAZYK AKO ANGLIČTINU, POSKYTNUTIE PREKLADATEĽSKÝCH SLUŽIEB JE ZODPOVEDNOSŤOU ZÁKAZNÍKA.
- NEPOKÚŠAJTE SA O OBSLUHU ZARIADENIA SKÔR, AKO SI NEPREČÍTATE NÁVOD NA OBLUHU A NEPOROZUMIETE MU.
- ZANEDBANIE TOHTO UPOZORNENIA MÔŽE VYÚSTIŤ DO ZRANENIA POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB, OBSLUHUJÚCEJ OSOBY ALEBO PACIENTA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, DO MECHANICKÉHO ALEBO INÉHO NEBEZPEČENSTVA.

ATENCION

(ES)

- ESTE MANUAL DE SERVICIO SOLO EXISTE EN INGLES.
- SI ALGUN PROVEEDOR DE SERVICIOS AJENO A GEMS SOLICITA UN IDIOMA QUE NO SEA EL INGLES, ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE OFRECER UN SERVICIO DE TRADUCCION
- NO SE DEBERA DAR SERVICIO TECNICO AL EQUIPO, SIN HABER CONSULTADO Y COMPRENDIDO ESTE MANUAL DE SERVICIO
- LA NO OBSERVANCIA DEL PRESENTE AVISO PUEDE DAR LUGAR A QUE EL PROVEEDOR DE SERVICIOS, EL OPERADOR O EL PACIENTE SUFRAN LESIONES PROVOCADAS POR CAUSAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS O DE OTRA NATURALEZA.

VARNING

(SV)

- DEN HÄR SERVICEHANDBOKEN FINNS BARA TILLGÄNGLIG PÅ ENGELSKA.
- OM EN KUNDS SERVICETEKNIKER HAR BEHOV AV ETT ANNAT SPRÅK ÄN ENGELSKA ANSVARAR KUNDEN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER.
- FÖRSÖK INTE UTFÖRA SERVICE PÅ UTRUSTNINGEN OM DU INTE HAR LÄST OCH FÖRSTÅR DEN HÄR SERVICEHANDBOKEN.
- OM DU INTE TAR HÄNSYN TILL DEN HÄR VARNINGEN KAN DET RESULTERA I SKADOR PÅ SERVICETEKNIKERN, OPERATÖREN ELLER PATIENTEN TILL FÖLJD AV ELEKTRISKA STÖTAR, MEKANISKA FAROR ELLER ANDRA FAROR.

DİKKAT

(TR)

- BU SERVİS KILAVUZUNUN SADECE İNGİLİZCESİ MEVCUTTUR.
- EĞER MÜŞTERİ TEKNİSYENİ BU KILAVUZU İNGİLİZCE DIŞINDA BİR BAŞKA LİSANDAN TALEP EDERSE, BUNU TERCÜME ETTİRMEK MÜŞTERİYE DÜŞER.
- SERVİS KILAVUZUNU OKUYUP ANLAMADAN EKİPMANLARA MÜDAHALE ETMEYİNİZ.
- BU UYARIYA UYULMAMASI, ELEKTRİK, MEKANİK VEYA DİĞER TEHLİKELERDEN DOLAYI TEKNİSYEN, OPERATÖR VEYA HASTANIN YARALANMASINA YOL AÇABİLİR.

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.

IMPORTANT! . . . X-RAY PROTECTION



X-ray equipment if not properly used may cause injury. Accordingly, the instructions herein contained should be thoroughly read and understood by everyone who will use the equipment before you attempt to place this equipment in operation. The General Electric Company, Medical Systems Group, will be glad to assist and cooperate in placing this equipment in use.

Although this apparatus incorporates a high degree of protection against x-radiation other than the useful beam, no practical design of equipment can provide complete protection. Nor can any practical design compel the operator to take adequate precautions to prevent the possibility of any persons carelessly exposing themselves or others to radiation.

It is important that everyone having anything to do with x-radiation be properly trained and fully acquainted with the recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements as published in NCRP Reports available from NCRP Publications, 7910 Woodmont Avenue, Room 1016, Bethesda, Maryland 20814, and of the International Commission on Radiation Protection, and take adequate steps to protect against injury.

The equipment is sold with the understanding that the General Electric Company, Medical Systems Group, its agents, and representatives have no responsibility for injury or damage which may result from improper use of the equipment.

Various protective material and devices are available. It is urged that such materials or devices be used.

CAUTION: United States Federal law restricts this device to use by or on the order of a physician.

CERTIFIED ELECTRICAL CONTRACTOR STATEMENT



All electrical installations that are preliminary to positioning of the equipment at the site prepared for the equipment shall be performed by licensed electrical contractors. In addition, electrical feeds into the Power Distribution Unit shall be performed by licensed electrical contractors. Other connections between pieces of electrical equipment, calibrations, and testing shall be performed by qualified GE Medical personnel. The products involved (and the accompanying electrical installations) are highly sophisticated, and special engineering competence is required. In performing all electrical work on these products, GE will use its own specially trained field engineers. All of GE's electrical work on these products will comply with the requirements of the applicable electrical codes.

The purchaser of GE equipment shall only utilize qualified personnel (i.e., GE's field engineers, personnel of third-party service companies with equivalent training, or licensed electricians) to perform electrical servicing on the equipment.

DAMAGE IN TRANSPORTATION

All packages should be closely examined at time of delivery. If damage is apparent, have notation "**Damage in Shipment**" written on **all** copies of the freight or express bill **before** delivery is accepted or "**signed for**" by a General Electric representative or a hospital receiving agent. Whether noted or concealed, damage **MUST** be reported to the carrier immediately upon discovery, or in any event, within 14 days after receipt, and the contents and containers held for inspection by the carrier. A transportation company will not pay a claim for damage if an inspection is not requested within this **14-day** period.

To file a report:

- Call 1-800-548-3366 and use option 8.
- Fill out a report on <http://egems.med.ge.com/edq/home.jsp>
- Contact your local service coordinator for more information on this process

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.

TABLE OF CONTENTS

SECTION 1

INTRODUCTION	1
1-1 Identification and Compatibility	1
1-2 General	2
1-3 Inspection	2
1-4 HHS Testing	2

SECTION 2

SPECIFICATIONS	4
2-1 Accuracy Criteria	4
2-2 Physical Characteristics	4
2-2-1 Dimensions (All measures are nominal)	4
2-2-2 Environmental Limits	4
2-3 Battery	4
2-3-1 Specifications	4
2-3-2 Battery Capacity	5
2-4 Movements	6
2-5 Moving Efforts	7
2-6 Drive Speed	7
2-7 Tube Unit Ratings	7
2-8 Generator Operator Indicators	7
2-9 kVp Accuracy	8
2-9-1 Test Method	8
2-10 mAs Metering Accuracy	8
2-10-1 Test Method	9
2-11 Reproducibility	9
2-12 Beam Quality	9
2-12-1 Test Method	9
2-13 Collimator Function	9
2-14 Collimator Alignment and SID	10
2-15 Collimator Light Field Intensity	10
2-16 AEC Minimum Exposure Time (Applies to units equipped with Mobil-AID)	10

SECTION 3

HHS TEST CHECKLISTS	11
3-1 HHS Tests (Excluding AEC)	11
3-1-1 Generator Operator Indicators	11
3-1-2 Technique Accuracy kVp/mA	11
3-1-3 Indirect Linearity	11
3-1-4 Technique Accuracy – mAs	11
3-1-5 Reproducibility Of Exposures – Non-AEC	11
3-1-6 Beam Quality (Half Value Layer)	12
3-1-7 Collimator Function	12
3-1-8 Collimator Alignment and SID	12
3-1-9 Collimator Light Field Intensity	12
3-2 AEC HHS Tests (Units with Mobil-AID)	12
3-2-1 Reproducibility Of Exposures – AEC	12
3-2-2 AEC Minimum Exposure Time	12

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.

REVISION HISTORY

REV	DATE	REASON FOR CHANGE
A	Oct. 30, 1996	Draft copy.
0	Dec. 13, 1996	Initial release.
1	Mar. 7, 1997	Changed Tube Column (Section 2-4) rotation to 270 degrees.
2	Aug. 14, 1997	High Impact Inspection.
3	Sept. 16, 1997	Added Keithly Non-Invasive Divider to kVp calibration and verification (Section 2-9-1).
4	Apr. 12, 1999	Added AMX-4+ Model 2236420.
5	Nov. 8, 2000	Added AMX-4+ Model 2275938.
6	Nov. 20, 2003	Revised moving efforts in section 2-5.
7	Aug. 20, 2006	Added new collimator 46-270615P3 (Medys) reference in Section 2-13.
8	May 09, 2008	Updated Section 2-12 for CFR 1020.30/31/32 regulatory compliance. Updated for international compliance. Updated model numbers in Table 1-2. Added model numbers to note in Table 1-2. Added model numbers to Section 2-2-1, step 1. Added model numbers to Section 2-3-1, step 2, 2nd bullet. Added model numbers to Section 2-4, step 1a and 1c.

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.

SECTION 1

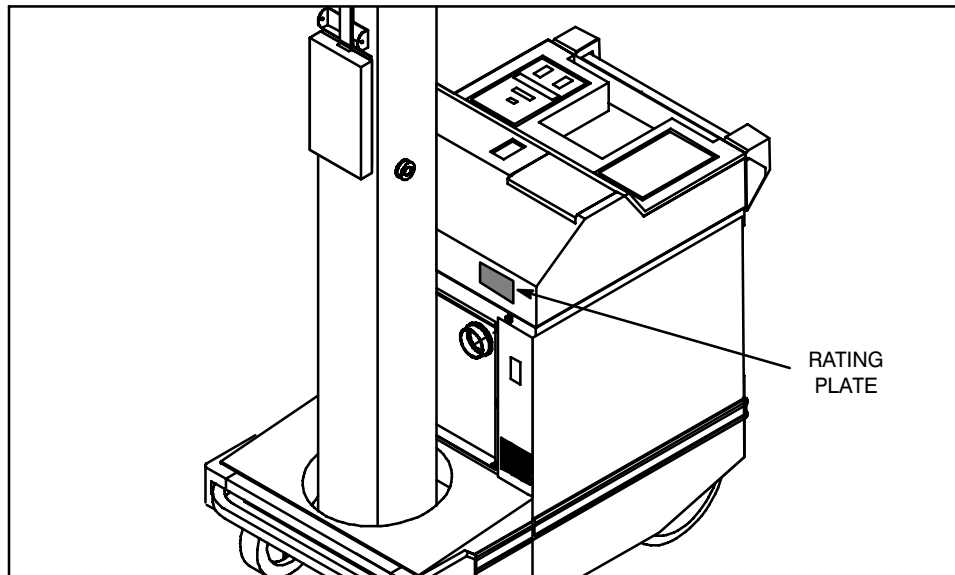
INTRODUCTION

1-1 Identification and Compatibility

See Illustration 1-1. The AMX-4+ is identified by Model Number on the rating plate located on the top cover. Model part and catalog numbers are identified in Table 1-1.

TABLE 1-1
AMX-4+ MODELS

Description	Part Number	Catalog Number	Part Number	Catalog Number
Domestic	2169360-7	A0659F	2236420-7 & 2275938-7	A0659JF
Domestic, AEC	2169360-8	A0659FA	2236420-8 & 2275938-8	A0659JG
Domestic, Tech Switch	2169360-9	A0659FC	2236420-9 & 2275938-9	A0659JH
Domestic, AEC, Tech Switch	2169360-10	A0659FB	2236420-10 & 2275938-10	A0659JJ
IEC, EMC	2169360	A0659A	2236420 & 2275938	A0659J
IEC, EMC, AEC	2169360-2	A0659AA	2236420-2 & 2275938-2	A0659JA
IEC, EMC, Tech Switch	2169360-3	A0659AB	2236420-3 & 2275938-3	A0659JB
IEC, EMC, AEC, Tech Switch	2169360-4	A0659AC	2236420-4 & 2275938-4	A0659JC
Japan	2169360-5	A0659C	2236420-5 & 2275938-5	A0659JD
Japan Short Column	2169360-6	A0659D	2236420-6 & 2275938-6	A0659JE
240V Short Column			2275938-12	A0659JM
240V Short Column, AEC			2275938-13	A0659JN
240V Short Column, Tech Switch			2275938-14	A0659JP
240V Short Column, AEC, Tech Switch			2275938-15	A0659JR
IEC, Tech Switch – Chinese			2275938-16	A0659JS
IEC, AEC, Tech Switch – Chinese			2275938-17	A0659JW

ILLUSTRATION 1-1
AMX-4+ IDENTIFICATION

The applicable components making up the AMX-4+ are identified with the nameplate statement, *“this product conforms to all applicable standards under 21 CFR part 1020,”* or *“complies with radiation performance standards, 21 CFR sub- chapter J.”*

TABLE 1-2
AMX-4+ COMPONENTS

Component	Model No.	Nameplate Location
HV Transformer	46-270954G2	Duplicate plate on front of top cover above circuit breaker
HRT X-ray Tube Housing	46-155750G8	Rear trim cover
Maxiray 75 TH 111 X-ray Tube Housing	2222709	Rear trim cover
Collimator	46-270615P3	Right side of Collimator
Mobil-AID D1300 Automatic Exposure Control*	46-279732P4 (A8413BA)	Duplicate plate on front of top cover above AEC paddle
*Note: Mobil-AID is present only on AMX-4+ Models 2169360-2, -4, -8, -10, 2236420-2, -4, -8, -10 and 2275938-2, -4, -8, -10, -13, -15, -17.		

1-2 General

The AMX-4+ contains operating safeguards to provide maximum safety. Before calling for service, be certain proper operating procedures are being used. Refer to Direction 2166913-1EN, AMX-4+ *Operation* for proper operating procedures.

Satisfactory equipment performance requires the use of service personnel specially trained on X-ray apparatus. GE Healthcare is responsible for the effects on safety, reliability, and performance only if the following conditions are met:

- The electrical wiring of the relevant rooms complies with all national and local codes.

- All assembly operations, extensions, re-adjustments, modifications, or repairs are carried out by GE Healthcare, authorized service representatives.
- The equipment is used in accordance with the instructions for use. Refer to Direction 2166913-1EN, *AMX-4+ Operating Manual* for proper operating procedures.



AMX-4+ contains high voltage circuits for generating X-rays. Only trained and qualified personnel should be permitted access to the internal parts of this equipment.

1-3 Inspection

In order to assure continued performance of this X-ray equipment, a Periodic Maintenance program must be established in accordance with 2173227-100 *AMX-4+ Periodic Maintenance*. It is the owner's responsibility to supply or arrange for this service.

1-4 HHS Testing

The United States Department of Health and Human Services (HHS) has established performance requirements for diagnostic X-ray equipment. These requirements are defined in Title 21 of the Code of Federal Regulations, and apply only to certain specified components identified as "certified equipment."

The manufacturer of specified diagnostic X-ray components must certify that the components:

1. Perform as required by the HHS standard when installed, adjusted, and tested as specified in the manufacturer's instructions to the assembler.

Refer to Direction 2173222-100 *AMX-4+ Installation* for HHS compliance testing as it pertains to the AMX-4+ during installation.

2. Will continue to comply when maintained in accordance with the manufacturer's instructions.

Refer to Direction 2173227-100 *AMX-4+ Periodic Maintenance* for periodic HHS compliance testing for the AMX-4+.

SECTION 2

SPECIFICATIONS

2-1 Accuracy Criteria

Specified accuracies are subject to additional errors for accuracy of instrumentation used during calibration and measurement. To achieve generator accuracies, the following criteria must be met:

- The **WAIT** message must not appear on the Message Display when taking an exposure.
- The **READY FOR EXPOSURE** message must appear on the Message Display.

General Electric Healthcare reserves the right to change specifications at any time without incurring any obligation to incorporate new features in products previously sold.

2-2 Physical Characteristics

2-2-1 Dimensions (All measures are nominal)

1. Height: 70 inches (1778 mm) for Models 2169360-6, 2236420-6, and 2275938-6, -12, -13, -14, -15; all others 76 inches (1930 mm).
2. Width: 25-3/16 inches (640 mm)
3. Length: 45-3/8 inches (1153 mm)
4. Weight: 1080 pounds (490 kg)

2-2-2 Environmental Limits

1. Operating temperature range: 59 to 100 Degrees Fahrenheit (15 to 38 Degrees Celsius) at 80% non-condensing humidity.
2. Storage temperature range -40 to +140 Degrees Fahrenheit (-40 to +60 Degrees Celsius)
3. Maximum operating altitude: 8,000 feet (2440 meters).

2-3 Battery

2-3-1 Specifications

1. Nine 12.9 volt batteries connected in series provide approximately 116 volts at full charge.
2. Battery charger requires the following:
 - > For Models 2169360-7, 2169360-8, 2169360-9, 2169360-10, 2236420-7 & 2275938-7, 2236420-8 & 2275938-8, 2236420-9 & 2275938-9, 2236420-10 & 2275938-10: 120 Volts AC, 60 Hz at 6 A.
 - > For Models 2169360, 2169360-2, 2169360-3, 2169360-4, 2236420 & 2275938, 2236420-2 & 2275938-2, 2236420-3 & 2275938-3, 2236420-4 & 2275938-4 and 2275938-12, -13, -14, -15, -16, -17: 220/240 Volts AC, 50 Hz at 3.15 A.
 - > For Models 2169360-5, 2169360-6, 2236420-5 & 2275938-5, 2236420-6 & 2275938-6: 100 Volts AC, 50/60 Hz at 6 A.

Voltage must be maintained to +/-10% of the nominal value during charging.

2-3-2 Battery Capacity

The AMX-4+ battery capacity can be measured by one of the following five methods. All capacities are measured after the AMX-4+ has been charged to the "CHARGE COMPLETE" state. Available capacity as stated applies only to new battery sets free of defective cells. Capacity may decrease as the battery nears the end of its useful life.

method 1: exams

The AMX-4+ batteries will provide capacity for more than 20 typical EXAMs. An "EXAM" is defined as:

- Two 70 kVp, 10 mAs X-ray exposures including:
 - > 7 seconds of prep (rotor and filament drive)
 - > 25 seconds of field light
- 5 minutes of drive time
- 9 minutes of idle time

The formula in the "VARIED USAGE" section can be used to determine the number of total EXAMs available for usage regimes different from this typical case.

method 2: X-ray Exposures

The AMX-4+ batteries will provide enough capacity for 165 or more 100 kVp, 100 mAs X-ray exposures. Each exposure includes 4 seconds of prep (rotor and filament drive) time and 30 seconds of idle time for battery recovery. This number may be reduced by additional idle time required for X-ray tube cooling.

method 3: drive time

The AMX-4+ batteries will provide enough capacity for 140 minutes of continuous drive time. This time is typically independent of driving conditions, however, it may be reduced if a significant portion of the drive is on carpeting or up ramps.

method 4: idle time

The AMX-4+ batteries will provide capacity for 23.3 hours of continuous idle time. "Idle" is the time when the AMX-4+ is ON but not being used.

method 5: Varied usage

For varied usage, the AMX-4+ batteries will provide capacity according to the following formula:

$$\begin{aligned} & \{ (\text{idle time in minutes}) \times 3 \} + \\ & \{ (\text{drive time in minutes}) \times 30 \} + \\ & \{ (\text{field light time in minutes}) \times 25 \} + \\ & \{ (\text{prep time in minutes}) \times 30 \} + \\ & \{ (\text{exposure energy}^*) \times 2.17 \} = 4200 \end{aligned}$$

$$*\text{exposure energy} = \text{cumulative } \{ (\text{kVp} \times \text{mAs}) \div 1000 \}$$

EXAMPLE: Assume one desires to estimate the number exams available from an AMX-4+ used in a particular pediatric ward. It is determined that a typical exam for this case is comprised of:

- Two 70 kVp, 0.8 mAs X-ray exposures including:
 - > 3 seconds of prep
 - > 15 seconds of field light

- 1 minute of drive
- 5 minutes of idle

Using the above formula we can estimate the number of exams as follows:

$$\begin{aligned} \text{each EXAM uses} \quad & \{ (5 \text{ idle minutes}) \times 3 \} + \\ & \{ (1 \text{ drive minutes}) \times 30 \} + \\ & 2 \times [\{ (15 \div 60 \text{ field light minutes}) \times 25 \} + \\ & \{ (3 \div 60 \text{ prep minutes}) \times 30 \} + \\ & \{ (70 \text{ kVp} \times 0.8 \text{ mAs}) \div 1000 \} \times 2.17] = 60.7 \end{aligned}$$

therefore the total number of typical EXAMS available is:

$$4200 \div 60.7 = 69$$

2-4 Movements

1. Tube vertical movement measured at the focal spot (arm extended):
 - a. Range at least 46.5 inches (1181 mm) for Models 2169360-6, 2236420-6 and 2275938-6, -12, -13, -14, -15; all others at least 52.5 inches (1334 mm).
 - b. Lowest position 26.1 inches (663 mm) max. from floor.
 - c. Highest position 72.6 inches (1844 mm) min. from floor for Models 2169360-6, 2236420-6 and 2275938-6, -12, -13, -14, -15; all others 78.6 inches (1996 mm) min. from floor.
2. The horizontal movement measured at the focal spot relative to column face is 24 inches (610 mm) minimum, to 40 inches (1016 mm) maximum.
3. Tube Column rotation measured from horizontal arm latch is +/-270 degrees.
4. Tube and yoke rotation around Horizontal Arm measured from tube port down position:
 - a. Range 360 degrees;
 - b. Detent locations 0, +/-90, and +/-180 degrees.
5. Tube Trunnion rotation measured from tube port down position:
 - a. Range 120 degrees;
 - b. Forward 110 degrees;
 - c. Backward 10 degrees;
 - d. Detent 0 degrees, and 90 degrees.
6. Collimator Rotation measured from the front of the collimator with the tube port facing down:
 - a. Range 180 degrees;
 - b. Right 90 degrees;
 - c. Left 90 degrees;
 - d. Detent 0 and 90 degrees.

2-5 Moving Efforts

1. Moving efforts with locks mechanically off (that is, energized electrically):
 - a. Vertical tube motion: 12 pounds (53 Newtons) maximum, measured going up or down; 15 pounds (67 Newtons), measured over last 4 inches (102 mm) of travel.
 - b. Horizontal tube motion: 14 pounds (62.3 Newtons) maximum, measured going in or out.
 - c. Tube Column rotation: 15 pound-feet (20.3 Newton-meters) maximum.
 - d. Tube and yoke angulation around horizontal Arm: 10 to 20 pound-feet (14 to 27 Newton-meters) to disengage from detent, 6 to 18 pound-feet (8 to 24 Newton-meters) to rotate between detents.
 - e. Tube rotation in yoke: 7 to 30 pound-feet (9.5 to 41 Newton-meters) to disengage from detent, 4 to 20 pound-feet (5 to 27 Newton-meters) to rotate between detents.
2. Moving efforts with locks mechanically on (that is, not energized electrically):
 - a. Vertical tube motion: 15 pounds (67 Newtons) minimum, 32 pounds (142 Newtons) maximum; measured going up or down.
 - b. Horizontal tube motion: 10 pounds (44.5 Newtons) minimum, 28 pounds (125 Newtons) maximum; measured going in or out.
 - c. Tube Column rotation: 25 to 40 pound-feet (34 to 54 Newton-meters).

2-6 Drive Speed

There are two speeds: Drive Speed with the horizontal Tube Arm secured for transport, and Maneuvering Speed with the horizontal Tube Arm removed from the Transport Latch.

Drive speed is measured on a smooth, hard and level surface. Speed will be reduced by inclines, carpeted or soft surfaces.

1. Drive Speed is 264 feet (6705 mm) per minute +/- 25%;
2. Maneuvering Speed is 30% to 60% of drive speed.

2-7 Tube Unit Ratings

Tube Housing and Insert Specifications are given in Direction 46-017226, *Tube Ratings, HRT 50 and 60 Hz.*, or in 2236721-100, *Product Data Sheet Maxiray 75 TH 11 X-ray Tube*. Also, refer to note on maximum allowable kVp and mAs ratings in 2166913-1EN AMX-4+ *Operating Manual*.

2-8 Generator Operator Indicators

Check for proper operation of tones or buzzers and labels as required by regulations. Reference "Generator Operator Indicators" in Tab 3 of Direction 46-013894, *System Field Test for HHS*.

1. X-ray on indicator lights during an exposure.
2. Audible tone occurs during exposure.
3. Audible tone occurs with safety timed termination of AEC exposures.
4. Safety timed termination of AEC exposures requires resetting before taking another exposure.
5. X-ray warning label is legible.

2-9 kVp Accuracy

1. Rise time of the kVp wave form from 10% to 90% of the maximum kVp is 1.2 millisecond or less.
2. Fall time of the kVp wave form from 90% of the maximum kV to 20 kV is 2.5 milliseconds or less.
3. Accuracy of the kVp wave form to selected kVp is $\pm 8\%$ of the value displayed on the operator panel for the first 20 ms and $\pm 5\%$ after 20 ms. Accuracy applies within the range of the bar graph battery charge indicator.

Note: These specifications do not apply to switching transients which occur during the first millisecond and the last millisecond of an exposure.

2-9-1 Test Method

Preferred

Use a Keithley Non-Invasive kVp Divider (Model 35080A with Deviation 535 or Model 35080B, both using Mobile Filter Pack Plus 37946C and optional Low Range Filter Pack 38237C). A Triad 35050A Dosimeter can also be used to provide digital readout of corrected kVp values. **No other substitutions for non-invasive kVp Dividers are approved!**

The set-up procedure and linear correction curves (non-Triad systems) for using the Keithley divider are covered in Section 3 of Direction 46-017561 *HHS Control and Tube Assembly Tests* and Keithley's Operation and Maintenance manuals.

Alternate

Use the GE C1515A Invasive Bleeder. If this method is used, the unit should be calibrated and verified with this meter.

Note: If an attempt is made to verify a unit calibrated with a C1515A bleeder with either of the above Keithley Non-Invasive dividers, kVp readings will read 5-7 kVp higher than when read with the C1515A. This is due to impedance changes in the high voltage circuit with the bleeder removed from the circuit and due to frequency compensation errors present using the C1515A divider with the AMX-4+ waveform.

The procedure for connecting the C1515A High Voltage divider is covered in Direction 46-013288 *Bleeder, High-Voltage Dual Type T8005G and C1515A Connection ... Applications*, and Direction 2196272-100, *High Voltage Cable Installation and Troubleshooting Procedures*.

Make exposures and calculations as described in "Technique Accuracy - kV/mA" in Tab 3 of Direction 46-013894 *System Field Test for HHS*.

2-10 mAs Metering Accuracy

Accuracy of mAs is the integral of X-ray tube emission current between the time at which the kV wave form reaches 75% of the indicated peak value at the beginning of an exposure and the time at which it falls to 75% of the indicated peak value when the exposure is terminated.

Actual mAs shall match selected mAs within $\pm 10\%$.

2-10-1 Test Method

This is an indirect procedure which verifies accuracy of the mAs metering circuitry and mAs calibration. Measuring mAs Metering Accuracy is done by injecting 100 mA into the mAs integrating circuit and comparing the response with a meter installed in the circuit. Reference Direction 2173223-100, *AMX-4+ Calibration* – familiarity with this direction is assumed. Also reference “Technique Accuracy – mAs” in Tab 3 of Direction 46-013894, *System Field Test for HHS*.

1. Enter mAs calibration and install meter.
2. At the prompt **ENTER VALUE** compare meter reading with displayed reading.
3. Correct reading to include meter accuracy before comparing with requirements.

Note: Accuracy of mA reading at the approximate 100 mA test condition is ± 0.1 mA. Meter accuracy must be added to the mA reading before making judgment on the final reading.

2-11 Reproducibility

The coefficient of variation for radiation output is less than 0.045 for successive exposures having constant technique factors.

Coefficient of variation is measured and calculated as described in “Reproducibility of Exposure” in Tab 3 of Direction 46-013894, *System Field Test for HHS*. This applies to all units for non-AEC mode – reference the procedure “for exposures made without the use of A.E.C.” For units equipped with Mobil-AID, also reference the procedure “for exposures made with an A.E.C.”

2-12 Beam Quality

The half-value layer of the useful beam at 80 kVp shall not be less than 2.5 millimeters of aluminum. This requirement differs slightly from and supersedes NCRP 33. The specific test point is at 80 kVp requiring a half value layer of 2.5 millimeters of aluminum. This applies to systems manufactured before June 10th, 2006.

For systems manufactured on or after June 10th, 2006 the following new regulation applies; The half-value layer of the useful beam at 80 kVp shall not be less than 2.9 millimeters of aluminum. The specific test point is at 80 kVp requiring a half value layer of 2.9 millimeters of aluminum.

Reference the System Rating Plate to determine manufactured date. Note: The rating plate shows month and year only. For systems manufactured during June, 2006 you must verify the manufactured date in the GE GIB database. Contact your local Service Representative for assistance.

2-12-1 Test Method

The procedure for measuring Beam Quality is presented in “Beam Quality (Half Value Layer)” in Tab 4 of Direction 46-013894 *System Field Test for HHS*. The following noted exceptions to that procedure apply for the AMX-4+:

1. Select initial technique factors of 80 kVp and 20 to 48 mAs.
2. When making an exposure without the absorber, adjust mAs so that the radiation meter reading contains three significant digits.
3. Use an AMX-4 absorber 46-173632G2 in the collimator rails.

- > For systems manufactured On or After June 10th, 2006 add additional aluminum filtration from the HVL Attenuator set part # 46-194427P274 found in the HHS Kit part # 46-303879G1 or 46-303879G2. Total test filtration = 3.1 mm of Aluminum. Affix these plates to the AMX-4 absorber with tape. Ensure the tape is not in the usable beam path.
- > For tube changes there is an additional 1.2 mm Aluminum cup added to the X-Ray Tube. This cup snaps onto the collimator mounting plate and is easily identified since the tube glass port is not visible. This cup must be present and retained for systems manufactured On or After June 10th, 2006. Likewise this cup if provided with the replacement tube it must be removed for systems manufactured before June 10th, 2006. Reference the system rating plate affixed to the AMX unit.

2-13 Collimator Function

A manual collimator, model 46-270615P2 (Micro Medical Systems) or model 46-270615P3 (Medys), bearing an HHS certification label is installed on the AMX-4+. Reference "Functional Test – Manual Rad Collimator Version" in Tab 6 of Direction 46-013894, *System Field Test for HHS*.

1. Minimum source to skin distance is limited to more than 30 centimeters by the skin spacers at the beam exit of the collimator.
2. Full 17 by 17 inch (43 by 43 centimeters) radiographic coverage at 40 inch (1.02 meter) Source to Image Distance.
3. Minimum inherent filtration of 2.0 mm aluminum equivalent at 100 kVp.

2-14 Collimator Alignment and SID

Collimator Alignment and SID tests are performed in accordance with Tab 6 of Direction 46-013894, *System Field Test for HHS*, reference:

SID Test
Light to X-ray Field Test
Center to Center Test
Field Indicator (Pointers to Actual Size)

1. The X-ray field size must agree with the indicated field size within 1.8% of SID.
2. Total misalignment of parallel edges of the light field with the edges of its X-ray field must not exceed 1.7% of SID.
3. The difference between the indicated SID and the actual SID must not exceed 1.8% of the indicated SID.

2-15 Collimator Light Field Intensity

The average illumination at a distance of 100 cm (39.37 inch) from the focal spot shall be 16 foot candles (170 lux) or more. Reference "Collimator Light Field Intensity" in Tab 6 of Direction 46-013894, *System Field Test for HHS*.

2-16 AEC Minimum Exposure Time

(Applies to units equipped with Mobil-AID)

When the X-ray kVp is equal to or greater than 50 kVp, the minimum exposure time will be equal to or greater than the time interval required to deliver 5 mAs. Reference "AEC Minimum Exposure Time" in Tab 3 of Direction 46-013894, *System Field Test for HHS*.

SECTION 3

HHS TEST CHECKLISTS

The importance of HHS compliance testing cannot be over emphasized. Before starting these procedures, review Direction 46-013894 *System Field Test for HHS*. Pay particular attention to "Introduction" (Tab 1 of Direction 46-013894).

With the exception of Collimator Function and Beam Quality, all field tests for HHS compliance are to be performed at specified intervals.

3-1 HHS Tests (Excluding AEC)

Requirements are pass or fail. Service is required if any Requirement is failed. After each Requirement is verified, place a check in its box. Record notes and comments next to the Requirement.

Inspect	Requirement	Inspector's Notes
3-1-1 Generator Operator Indicators Required during Installation, preventative maintenance calls, or when replacing major components.	<input type="checkbox"/> Check for proper operation of tones and buzzers as required by regulations. Refer to "Generator Operator Indicators" in Section 2 of Direction 2173221-100, <i>AMX-4+ Ratings And Specifications</i> , and perform defined inspection.	
3-1-2 Technique Accuracy kVp/mA Required during Installation, preventative maintenance calls, and repair.	<input type="checkbox"/> Actual kVp matches select kVp. Refer to "kV Accuracy" in Section 2 of Direction 2173221-100, <i>AMX-4+ Ratings & Specifications</i> , and perform procedure.	
3-1-3 Indirect Linearity Required during Installation, preventative maintenance calls, and repair.	<input type="checkbox"/> Refer to "Indirect Linearity" in Tab 3 of Direction 46-013894, <i>System Field Test for HHS</i> .	
3-1-4 Technique Accuracy – mAs Required during Installation, preventative maintenance calls, and repair.	<input type="checkbox"/> Refer to "mAs Metering Accuracy" in Section 2 of Direction 2173221-100, <i>AMX-4+ Ratings & Specifications</i> , and perform defined procedure.	
3-1-5 Reproducibility Of Exposures – Non-AEC Required during Installation, preventative maintenance calls, and repair.	<input type="checkbox"/> Refer to "Reproducibility" in Section 2 of Direction 2173221-100, <i>AMX-4+ Ratings & Specifications</i> , and perform defined procedure for non-AEC mode exposures.	

Inspect	Requirement	Inspector's Notes
3-1-6 Beam Quality (Half Value Layer) Required during Installation, or after replacement of tube unit, collimator, or other absorption between source and patient.	<input type="checkbox"/> Refer to "Beam Quality" in Section 2 of Direction 2173221-100, <i>AMX-4+ Ratings & Specifications</i> , and perform defined procedure.	
3-1-7 Collimator Function Required during Installation, or after replacement of collimator.	<input type="checkbox"/> Refer to "Collimator Function" in Section 2 of Direction 2173221-100, <i>AMX-4+ Ratings & Specifications</i> , and perform defined checks.	
3-1-8 Collimator Alignment and SID Required during Installation, preventative maintenance calls, and repair.	<input type="checkbox"/> Refer to "Collimator Alignment and SID" in Section 2 of Direction 2173221-100, <i>AMX-4+ Ratings & Specifications</i> , and perform defined procedures.	
3-1-9 Collimator Light Field Intensity Required during Installation, preventative maintenance calls, and repair.	<input type="checkbox"/> Refer to "Collimator Light Field Intensity" in Section 2 of Direction 2173221-100, <i>AMX-4+ Ratings & Specifications</i> , and perform defined procedure.	

3-2 AEC HHS Tests (Units with Mobil-AID)

Requirements are pass or fail. Service is required if any Requirement is failed. After each Requirement is verified, place a check in its box. Record notes and comments next to the Requirement.

Inspect	Requirement	Inspector's Notes
3-2-1 Reproducibility Of Exposures – AEC Required during Installation, preventative maintenance calls, and repair.	<input type="checkbox"/> Refer to "Reproducibility" in Section 2 of Direction 2173221-100, <i>AMX-4+ Ratings & Specifications</i> , and perform defined procedure for AEC mode exposures.	
3-2-2 AEC Minimum Exposure Time Required during Installation, preventative maintenance calls, and repair.	<input type="checkbox"/> Refer to "AEC Minimum Exposure Time" in Section 2 of Direction 2173221-100, <i>AMX-4+ Ratings & Specifications</i> , and perform defined procedure.	

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.



GE Healthcare

*GE Healthcare: Telex 3797371
P.O. Box 414, Milwaukee, Wisconsin 53201 U.S.A.
(Asia, Pacific, Latin America, North America)*

*GE Healthcare — Europe: Telex 698626
283, rue de la Minière, B.P. 34, 78533 Buc Cedex
France*